


TELEMAX

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Telemax Ζυγαριά Μπάνιου BG-221

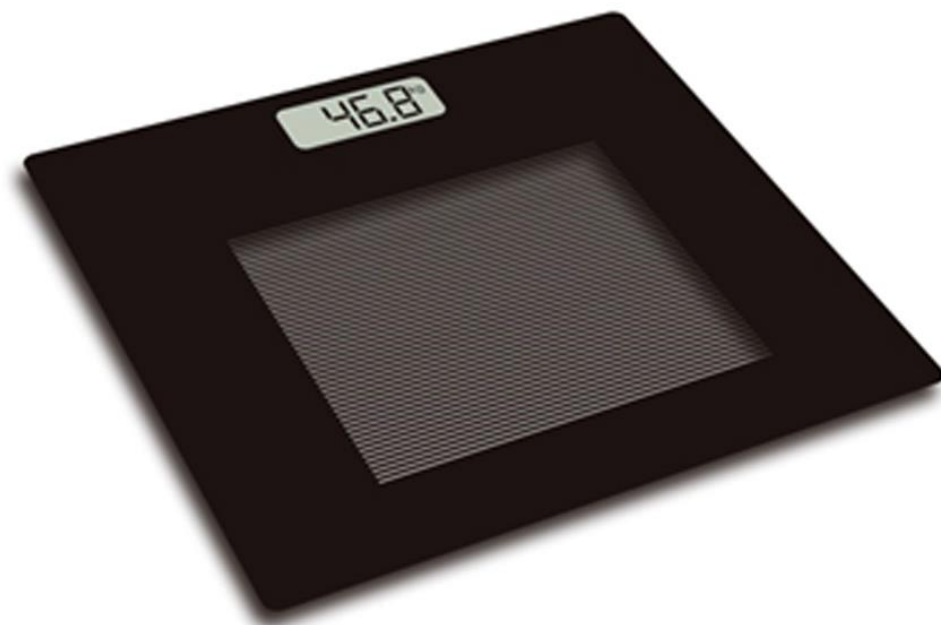

Αξιότιμη πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Ευχαριστούμε πολύ!

www.telemax.gr

2310-417494 & 2310427867

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2)

CE

Προειδοποίηση

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.


Οδηγίες ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Κρατήστε αυτήν τη συσκευή μακριά από αυτήν παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ είναι σε χρήση.
- Μην υπερβαίνετε τη συσκευή ικανότητα ζύγισης (βάρος).
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα πόδια σας είναι βρεγμένα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε όρθια στάση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το γυαλί είναι ραγισμένο ή σπασμένο.
- Η μη χρησιμοποίηση του προϊόντος σωστά μπορεί να είναι επικίνδυνη, καθιστώντας δε την εγγύηση άκυρη και μηδενική ευθύνη.

Η Telemax απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν σε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα λόγω της μη τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων.

Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες ασφαλείας έχουν διαβαστεί από την αρχή. Το εγχειρίδιο ακολουθείται ανά πάσα στιγμή κατά τη χρήση. Η ζυγαριά επιτρέπει ένα μέγιστο βάρος 180kg. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την εκκίνηση αυτής της συσκευής.

Μέρη της συσκευής

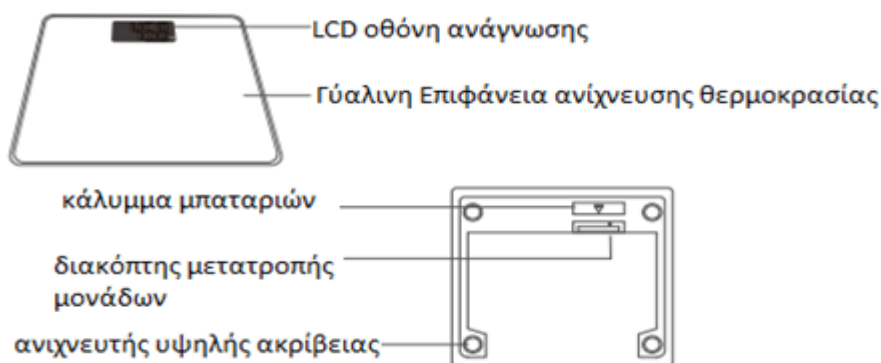

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Αυτόματη ενεργοποίηση / αυτόματη απενεργοποίηση
- Αυτόματη επαναφορά σε μηδενισμό
- Μονάδες βάρους: kg-lb-st
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας / υπερφόρτωσης

Διαστάσεις	300X260X18MM
Ενέργεια	2xAAA batteries μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)
Οθόνη	LCD οθόνη ανάγνωσης
Μέγιστη Χωρητικότητα	180KG/400lb/28st
Μονάδα Μέτρησης	100g/0.2lb
Ελάχιστο πραγματικό βάρος	6kg

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μπαταριών

1. Στη βάση της ζυγαριάς, αφαιρέστε απαλά το κάλυμμα της μπαταρίας σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.
 2. Εισάγετε τις μπαταρίες 2xAAA στο χώρο σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας στη βάση.
 3. Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σπρώξτε το προς τα πίσω.
- Προειδοποίηση: Λάβετε υπόψη ότι η λανθασμένη πολικότητα θα προκαλέσει μόνιμη επίπτωση στα ηλεκτρονικά μέρη.

Λειτουργία

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Πατήστε απαλά τη ζυγαριά και η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις ληφθεί μια σταθερή ανάγνωση, η οθόνη θα κλειδώσει και θα αναβοσβήνει για να υποδείξει το τελικό βάρος.
3. Η ζυγαριά θα σβήσει αυτόματα περίπου σε 8 δευτερόλεπτα όταν δεν θα υπάρχει καμία λειτουργία.

Προειδοποίηση

1. Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά σε χαλί ή παρόμοια μαλακή επιφάνεια, διαφορετικά θα επηρεαστεί η ακρίβεια της.
2. Διατηρήστε ισορροπία στη ζύγιση. Μην αφήνετε το σώμα σας να ταλαντώνεται.

Μετατροπή μονάδας

Εάν η ζυγαριά είναι με συστήματα μονάδων Metric (κιλά) και Imperial (λίβρες), οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μονάδες από kg (kg) έως lb (pounds) ή st (stone).

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Εντοπίστε το διακόπτη της συσκευής στη θήκη μπαταριών. Στην κατάσταση ζύγισης, πατήστε το πλήκτρο εναλλαγής μονάδας για να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα.

Ένδειξη σφάλματος

Lo

Το σύμβολο "Lo" στην οθόνη δείχνει ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή. Αντικαταστήστε τη νέα μπαταρία.

Err

Το σύμβολο "Err" στην οθόνη δείχνει ότι η ζυγαριά είναι υπερφορτωμένη. Αφαιρέστε βάρος για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο προϊόν.

C

Αν το σύμβολο "C" εμφανιστεί στην οθόνη καθώς κατεβαίνετε από τη ζυγαριά, αυτό υποδεικνύει ότι έχει συμβεί κάποιο σφάλμα. Παρακαλώ ανεβείτε πάλι.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Διατηρείτε πάντα τη ζυγαριά σε οριζόντια θέση και μην την τοποθετείτε σε υγρή ή θερμή κατάσταση.
- Αποφύγετε το χτύπημα ή την πτώση της ζυγαριάς, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα στη ζυγαριά όταν δεν χρησιμοποιείτε.
- Μην την υπερφορτώνετε αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα ανίχνευσης βάρους.
- Αντιμετωπίστε τη ζυγαριά με προσοχή καθώς είναι πολύ ακριβές ηλεκτρονικό όργανο.
- Μη τη βυθίζετε στο νερό

- Καθαρίστε τη ζυγαριά με ένα μαλακό υγρό πανί, μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά λειαντικά.
- Κρατήστε την επιφάνεια της ζυγαριάς στεγνή και μην τη χρησιμοποιήσετε σε ολισθηρό δάπεδο.
- Μη ζυγίζετε με υγρά πόδια για να αποφύγετε την ολίσθηση.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Συμβουλές για τις μπαταρίες

- Εάν η ζυγαριά δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές περιόδους, συνιστάται η αφαίρεση των μπαταριών για να αποφευχθεί η ζημιά λόγω πιθανής διαρροής της μπαταρίας.
- Κρατήστε την μπαταρία μακριά από τα παιδιά.
- Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες, με διαφορετικές συνθέσεις ή διαφορετικές μάρκες, για να αποφύγετε πιθανή διαρροή, έκρηξη.
- Μη θερμαίνετε ή παραμορφώνετε τις μπαταρίες με φωτιά.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα.
- Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την τοπική αρχή για συμβουλές ανακύκλωσης μπαταριών

CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349